


# MagnetaPure 96 y 32

Extracción automatizada de ácidos nucleicos

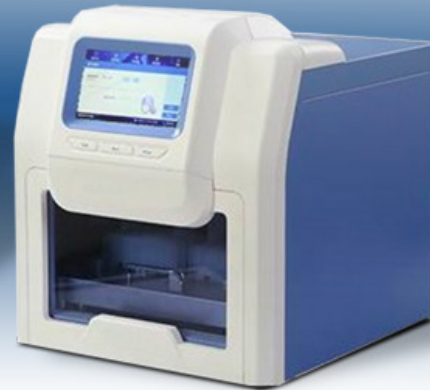

## MagnetaPure 96

Equipo: 255745

Placas deepwell de 96 pocillos: 531556B (50 Uds.)

Placas de elución: 531558B (100 Uds.)

Peines: 531557B (100 Uds.)

## MagnetaPure 32

Equipo: 255743

Placas deepwell de 96 pocillos: 531564B (50 Uds.)

Peines: 531565B (200 Uds.)

## Características

- ✓ Sistema automatizado de extracción de ADN, ARN, proteínas
- ✓ Procesamiento: 32 o 96 muestras
- ✓ Muestras: sangre, bacterias, tejidos, fluidos corporales y plantas
- ✓ Tecnología: separación mediante bolas magnéticas
- ✓ Kits compatibles: kits NucleoMag™ de Macherey-Nagel
- ✓ Plug & Play
- ✓ Garantía de 2 años



	MAGNETAPURE 32	MAGNETAPURE 96
Numero de muestras	32	96
Tipo de kits compatibles	96 placa deepwell	
Volumen de muestra	50-1000 µl	
Estabilidad	CV ≤ 5%	
Temperatura de lisis y elución	Temperatura ambiente hasta 120°C	
Tiempo de calentamiento	Temperatura ambiente hasta 120°C ≤ 4 minutos	
Precisión de temperatura	±1°C	
Interfaz	Pantalla táctil 7", 3 botones rápidos y ratón disponible	
Interfaz de expansión	USB, puerto ethernet y WiFi	
Protocolos	8 grupos preinstalados, 100 grupos pueden ser guardados	
Red	Ethernet remoto extensible, WiFi, 4G	
Almacenamiento de datos	Disponible con SD-card	
Control de contaminación	Lámpara UV	
Potencia máxima	450 W	300 W
Dimensiones	40x47x45	52x62x50
Peso	28 kg	54 kg

## Compatibilidad con kits de Macherey Nagel



MUESTRAS	DESCRIPCIÓN
VIRUS, BACTERIAS Y OTROS PATÓGENOS	Kit de extracción de ADN de microbioma NucleoMag™ DNA Microbiome
	Kit de extracción de ADN genómico de muestras microbianas NucleoMag™ DNA
	Kit de extracción de ADN y ARN viral de plasma o suero NucleoMag™ Virus
	Kit de extracción de ADN y ARN viral de muestras veterinarias NucleoMag™ Vet
	Kit de extracción de ARN y ADN de patógenos de muestras clínicas NucleoMag™ Pathogen
SANGRE Y FLUIDOS	Kit de extracción de ARN viral NucleoMag™ Dx Pathogen con certificado CE-IVD
	Kit de extracción de ADN de sangre (<200 µl) por bolas magnéticas NucleoMag™ Blood
	Kit de extracción de ADN genómico de sangre (<3 ml) por bolas magnéticas NucleoMag™ Blood
	Kit de extracción de ADN genómico de muestras de plasma NucleoMag™ DNA Plasma
TEJIDO Y CÉLULAS	Kit de extracción de ADN de muestras de hisopos NucleoMag™ DNA Swab
	Kit de extracción de ADN genómico de tejidos y células NucleoMag™ Tissue
	Kit de extracción de ADN de muestras parafinadas NucleoMag™ DNA FFPE
	Kit de extracción de ARN de células y tejidos por bolas magnéticas NucleoMag™ RNA
MUESTRAS FORENSES	Kit de extracción de ADN genómico de plantas por bolas magnéticas NucleoMag™ Plant
	Kit de extracción de ADN de muestras forenses por bolas magnéticas, NucleoMag™
NGS	Kit de extracción de ADN de muestras forenses NucleoMag™ DNA Forensic
COMIDA	Kit de limpieza y selección por tamaño de productos NGS por bolas magnéticas NucleoMag™ NGS
AGUA	Kit de extracción de ADN de alimentos por bolas magnéticas NucleoMag™ Food
	Kit de extracción de muestras de agua y aire NucleoMag™ DNA-RNA Water

Si desea solicitar una demo o recibir más información sobre los kits, mándanos un email a: [ddbiolab@ddbiolab.com](mailto:ddbiolab@ddbiolab.com)

**DD Biolab**  
CONSUMIBLES E INSTRUMENTACIÓN PARA LABORATORIO



+34 93 403 44 18

[ddbiolab@ddbiolab.com](mailto:ddbiolab@ddbiolab.com)

[www.ddbiolab.com](http://www.ddbiolab.com)